

# Корсеты пояснично-крестцовые Lumbitron® Elite




Новый корсет Lumbitron® Elite изготовлен из многополосного воздухопроницаемого материала последнего поколения: прочного, эластичного, легкого и износостойкого.

Такой материал увеличивает срок использования изделия, обеспечивает лучшую фиксацию и равномерную компрессию.


Вместо традиционных швов применяется технология ультразвуковой спайки, что обеспечивает комфорт, исключает натирание и позволяет носить корсет на голое тело.



Усовершенствованный материал: более прочный и мягкий, не теряет свою эластичность, так как тянется только в продольном направлении.

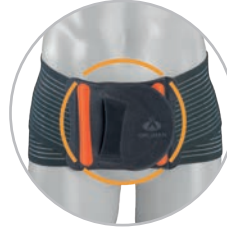

Закругленный край корсета и застежки micro velcro позволяют надежно зафиксировать корсет под разным углом, обеспечивая его идеальную посадку.

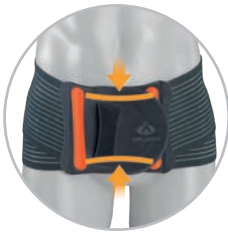

Передняя стенка корсета высотой 14 см не раздражает область паховых складок в положении сидя и не сдавливает выступающий живот и бока. Два пластиковых ребра жесткости предупреждают скручивание корсета.



Ленты идут по направлению косых мышц живота, стимулируют их и активизируют мышцы-стабилизаторы. За счет этого восстанавливается функциональный тонус передней брюшной стенки и формируется физиологически правильное положение позвоночника.



Задняя часть корсета обеспечивает регулируемую фиксацию пояснично-крестцового отдела, разгружает спазмированные (перегруженные) мышцы, улучшает микроциркуляцию и восстанавливает объем движений.



Брюшной модуль обеспечивает фиксацию живота и стимулирует естественный мышечный тонус передней брюшной стенки. Поддерживает внутрибрюшное давление, что положительно влияет на работу внутренних органов и их кровообращение. Не затрудняет процесс дыхания.



**Оптимальная фиксация:** Четыре металлических гибких ребра жесткости подстраиваются под положение тела (сидя, стоя, в движении) и обеспечивают равномерную полужесткую фиксацию.

**Регулируемая компрессия:** Эластичные ленты основной части корсета и дополнительного пояса оказывают локальную стабилизацию и снимают мышечное напряжение. Индивидуально дозированная степень компрессии активирует проприоцепцию, улучшая мышечный контроль.

Арт.: LTG-285

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ КОРСЕТ

Средняя фиксация



**Комплектующие:**  
корсет и подушечка из вспененного материала.



**Действие:**

Обеспечивает фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника, активирует проприоцепцию, облегчает или устраняет болевой синдром.

**Особенности:**

Пояснично-крестцовый корсет анатомической формы выполнен из воздухопроницаемого эластичного материала, обеспечивающего регулируемую компрессию и идеальную посадку. Не теряет свои свойства после многократных стирок. Очень легкий и практичный. Можно носить на голое тело. Внутренняя часть корсета оснащена съемной подушкой из вспененного материала, сохраняющей тепло и улучшающей прилегание.

**Показания:**

- Болевой синдром в области поясницы (люмбагия).
- Радикулит (воспаление спинномозгового нерва).
- Мышечная слабость.
- Дегенеративно-дистрофические изменения.
- Пред и послеоперационная реабилитация.
- Профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при бытовых и профессиональных нагрузках.

**Внимание!** Измерения для корсетов LTG-285/305 проводятся на уровне бёдер. См. стр. 94.

РАЗМЕР	ОКРУЖНОСТЬ, СМ	ОБЪЕМ БЕДЕР	ВЫСОТА СПЕРЕДИ	ВЫСОТА СЗАДИ
1	75–85			14 см
2	85–95			14 см
3	95–105			14 см
4	105–115			14 см
5	115–125			14 см
6	125–135			26 см

Арт.: LTG-305


ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ КОРСЕТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЯСОМ

Полужесткая фиксация



**ХИТ**

**Комплектующие:**  
корсет, анатомическая подушечка из вспененного материала, пояс для большей компрессии.

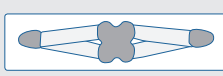

**Действие:**

Обеспечивает фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника, активирует проприоцепцию, облегчает или устраняет болевой синдром.

**Особенности:**

- Пояснично-крестцовый корсет анатомической формы выполнен из воздухопроницаемого эластичного материала, обеспечивающего равномерную компрессию и идеальную посадку. Не теряет свои свойства после многократных стирок.
- Очень легкий и практичный. Можно носить на голое тело. Внутренняя часть корсета оснащена съемной анатомической подушкой из пенного материала, сохраняющей тепло и улучшающей прилегание.
- Корсет усилен съемным поясом, который обеспечивает дополнительную фиксацию и максимальную поддержку. Пояс может быть отрегулирован по высоте либо удален.


**Показания:**

- Болевой синдром в пояснично-крестцовом отделе (люмбагия).
- Радикулит (воспаление спинномозгового нерва), воспаление седалищного нерва. Спондилолиз и спондилоартроз.
- Мышечная слабость.
- Дегенеративно-дистрофические изменения.
- Пред и послеоперационная реабилитация.
- Профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при бытовых и профессиональных нагрузках.
- Протрузии и грыжи межпозвоночных дисков с болевым синдромом.

**Внимание!** Измерения для корсетов LTG-285/305 проводятся на уровне бёдер. См. стр. 94.

РАЗМЕР	ОКРУЖНОСТЬ, СМ	ОБЪЕМ БЕДЕР	ВЫСОТА СПЕРЕДИ	ВЫСОТА СЗАДИ
1	75–85			14 см
2	85–95			14 см
3	95–105			14 см
4	105–115			14 см
5	115–125			14 см
6	125–135			26 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС

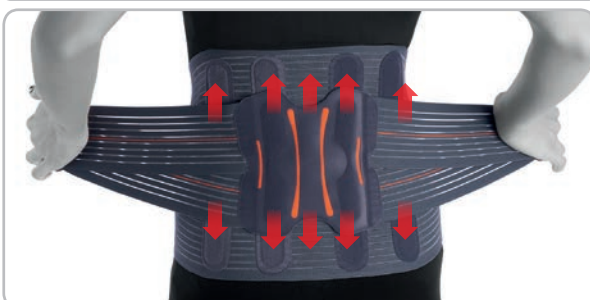

Пояс изготовлен из велюровой ткани и многополосного эластичного материала с застежками-липучками micro velcro изнутри, которые позволяют фиксировать его на задней части корсета. От места крепления отходят эластичные сдвоенные ленты, которые застегиваются спереди, обеспечивая дополнительную фиксацию и стабилизацию.

Обладает усиливающим эффектом для максимальной поддержки. По мере снижения болевого синдрома, пояс можно убрать.

Положение пояса можно менять, в зависимости от очага боли для увеличения эффекта (вверх или вниз).

При локализации боли преимущественно с одной стороны, пояс можно смещать (влево или вправо) и локально фиксировать в области выраженного болевого синдрома.

Расположенные на концах эластичных лент слоты для пальцев, позволяют индивидуально регулировать натяжение для достижения максимального комфорта.