

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

- Обеспечивают правильную постановку стоп в статическом положении.
- Обеспечивают физиологически правильный пережат в динамике (при ходьбе).
- Амортизируют и восполняют рессорную функцию стоп.
- Поглощают ударную вибрацию, предотвращая микротравматизацию суставов нижних конечностей и позвоночника.
- Способствуют снижению усталости и болезненных ощущений в стопах.

ПОКАЗАНИЯ

- Комбинированное плоскостопие I-II степени
- Нефиксированная форма плоскостопия III степени (для арт. 480.46 и 482.46)
- Плантарный фасциит (пяточная шпора)
- Неврома Мортона
- Деформации стоп (молоткообразные пальцы, Hallux Valgus)
- Гиперкератоз, мозоли, натоптыши
- Слабость связочного аппарата стоп
- Болевой синдром в стопе различной этиологии, усиливающийся при ходьбе (для арт. 480.46)
- Венозная недостаточность и отеочный синдром
- Комплексная реабилитация при дорсопатиях (остеохондрозе) и артропатиях суставов нижних конечностей (в т.ч. коксартроз, гонартроз, остеоартроз)
- Беременность, лишний вес
- Интенсивные динамические и статические нагрузки на ноги

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. При подборе ортопедических стелек рекомендуем проконсультироваться с врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК SALUBER:

- Стельки вкладываются в стандартную обувь с закрытой пяткой.
- Размер стелек подбирается по размеру стопы в соответствии с размером обуви.
- Ограничения по использованию стелек по весу пациента: до 125 кг.
- В период адаптации рекомендуется носить стельки начиная с 2-х часов в день, и увеличивая время ношения ежедневно на 1 час.
- При появлении болевых ощущений рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ:

- При загрязнении стельки следует протирать влажной губкой, смоченной бытовым моющим средством. Не стирать в стиральной машине.
- Сушить при температуре 20-25 градусов С°.
- Храните стельки, которые не используются в обуви, в сухом месте, вдали от нагревательных приборов.
- Масла, лосьоны и мази могут повредить верхнее покрытие стелек.
- Не используйте растворители для выведения пятен.
- Изделия предназначены для многократного личного использования. Соблюдение мер безопасности не требуется.
- Возможные последствия при использовании изделий не по назначению не выявлены.



Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.
Регистрационное Удостоверение на медицинское изделие
от 22 ноября 2022 года №РЗН 2022/18885

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1 пара в упаковке

СРОК ГОДНОСТИ не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 6 месяцев со дня покупки при соблюдении покупателем рекомендаций по использованию и уходу.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- Механические повреждения и привнесенные загрязнения
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОЧУВСТВУЙ КОМФОРТ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки SALUBER®.

Ортопедические стельки SALUBER® разработаны и произведены в Италии в сотрудничестве с ведущими медицинскими специалистами.

Более 20ти лет врачи-ортопеды в Италии, США и других странах рекомендуют своим пациентам стельки SALUBER®.

Уникальная конструкция и материалы стелек обеспечивают их медицинскую эффективность, устойчивость к износу и одновременно – непревзойденный комфорт при использовании.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Стельки SALUBER® обеспечивают полную ортопедическую поддержку и амортизацию стоп благодаря конструктивным элементам из запатентованного материала PORON® разной плотности.

PORON®

это вспененный полиуретан класса Hi-TECH, который обладает максимальными характеристиками упругости и поглощения ударных вибраций по сравнению с аналогами.


АМОРТИЗАЦИЯ

пружинящий слой PORON® смягчает удар при соприкосновении с поверхностью, и помогает стопе отталкиваться при ходьбе, что облегчает движение и предотвращает усталость.

ЗАЩИТА

миллионы воздушных пузырьков, заключенные в гибкие полимерные мембраны, поглощают максимум ударных вибраций и защищают суставы от нагрузок, ведущих к микротравматизации.

СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ СТОПЫ

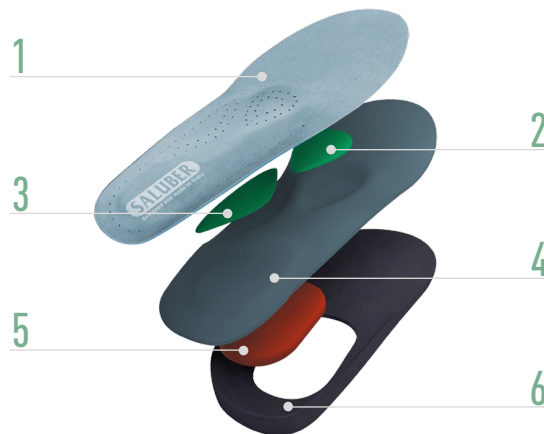

1. ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

в двух вариантах исполнения: ALCANTARA и REAL LEATHER.

2. МЕТАТАРЗАЛЬНЫЙ ВАЛИК ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ И ПЛОТНОСТИ ИЗ PORON®

динамично поддерживает поперечный свод и мягко пружинит при ходьбе, не вызывая дискомфорта.

3. УПРУГИЙ СУПИНАТОР ИЗ PORON®

обеспечивает динамическую поддержку продольного свода, способствует правильной постановке стопы при ходьбе и предотвращает завал стопы.

4. АМОРТИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ PORON®

толщиной 3 мм поглощает ударные вибрации и распределяет нагрузку по всей стопе (для моделей с ALCANTARA® арт. 480.46, 482.46)

5. УВЕЛИЧЕННЫЙ ПЯТОЧНЫЙ АМОРТИЗАТОР «АНТИ-ШОК» PORON®

поглощает удар, предохраняет суставы и позвоночник от микротравм и обеспечивает безболезненную ходьбу при пяточной шпоре.

6. НАДЕЖНЫЙ КАРКАС С ЭФФЕКТОМ «КОКОНА»

из смеси пластика и резины обеспечивает баланс между стабилизацией стопы и естественной био-механикой движения. Области продольного свода усилена ребрами жесткости, что предохраняет каркас от деформации даже при большом весе пациента.

АССОРТИМЕНТ

Подберите для себя наиболее подходящую модель ортопедических стелек из ассортимента SALUBER®

ALCANTARA®



арт. 480.46

арт. 482.46

Наиболее комфортные стельки с премиальным покрытием ALCANTARA и амортизирующим слоем PORON®.

ALCANTARA® - запатентованный материал экстра-класса с уникальными свойствами. Мягкое и бархатистое покрытие **отличается высокой устойчивостью к износу**. Этот материал является современным аналогом натуральной замши, обладает гипоаллергенными свойствам и **предотвращает развитие бактерий**. Микроволокна в составе обеспечивают оптимальный воздухо-и влагообмен.

REAL LEATHER



арт. 405.46

арт. 401.30

Премиальные стельки из натуральной и бархатистой кожи высочайшего качества.

REAL LEATHER - натуральная коровья кожа премиальной выделки растительного дубления, без использования химических веществ. Не раздражает кожу и поддерживает естественный воздухо-влагообмен. Нескользкая поверхность и оптимальная толщина покрытия гарантируют высокую износостойкость и увеличивают срок службы.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

- Обеспечивают правильную постановку стоп в статическом положении.
- Обеспечивают физиологически правильный пережат в динамике (при ходьбе).
- Амортизируют и восполняют рессорную функцию стоп.
- Поглощают ударную вибрацию, предотвращая микротравматизацию суставов нижних конечностей и позвоночника.
- Способствуют снижению усталости и болезненных ощущений в стопах.

ПОКАЗАНИЯ

- Комбинированное плоскостопие I-II степени
- Нефиксированная форма плоскостопия III степени (для арт. 480.46 и 482.46)
- Плантарный фасциит (пяточная шпора)
- Неврома Мортона
- Деформации стоп (молоткообразные пальцы, Hallux Valgus)
- Гиперкератоз, мозоли, натоптыши
- Слабость связочного аппарата стоп
- Болевой синдром в стопе различной этиологии, усиливающийся при ходьбе (для арт. 480.46)
- Венозная недостаточность и отеочный синдром
- Комплексная реабилитация при дорсопатиях (остеохондрозе) и артропатиях суставов нижних конечностей (в т.ч. коксартроз, гонартроз, остеоартроз)
- Беременность, лишний вес
- Интенсивные динамические и статические нагрузки на ноги

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. При подборе ортопедических стелек рекомендуем проконсультироваться с врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК SALUBER:

- Стельки вкладываются в стандартную обувь с закрытой пяткой.
- Размер стелек подбирается по размеру стопы в соответствии с размером обуви.
- Ограничения по использованию стелек по весу пациента: до 125 кг.
- В период адаптации рекомендуется носить стельки начиная с 2-х часов в день, и увеличивая время ношения ежедневно на 1 час.
- При появлении болевых ощущений рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ:

- При загрязнении стельки следует протирать влажной губкой, смоченной бытовым моющим средством. Не стирать в стиральной машине.
- Сушить при температуре 20-25 градусов С°.
- Храните стельки, которые не используются в обуви, в сухом месте, вдали от нагревательных приборов.
- Масла, лосьоны и мази могут повредить верхнее покрытие стелек.
- Не используйте растворители для выведения пятен.
- Изделия предназначены для многократного личного использования. Соблюдение мер безопасности не требуется.
- Возможные последствия при использовании изделий не по назначению не выявлены.



Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.
Регистрационное Удостоверение на медицинское изделие
от 22 ноября 2022 года №РЗН 2022/18885

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1 пара в упаковке

СРОК ГОДНОСТИ не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 6 месяцев со дня покупки при соблюдении покупателем рекомендаций по использованию и уходу.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- Механические повреждения и привнесенные загрязнения
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОЧУВСТВУЙ КОМФОРТ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки SALUBER®.

Ортопедические стельки SALUBER® разработаны и произведены в Италии в сотрудничестве с ведущими медицинскими специалистами.

Более 20ти лет врачи-ортопеды в Италии, США и других странах рекомендуют своим пациентам стельки SALUBER®.

Уникальная конструкция и материалы стелек обеспечивают их медицинскую эффективность, устойчивость к износу и одновременно – непревзойденный комфорт при использовании.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Стельки SALUBER® обеспечивают полную ортопедическую поддержку и амортизацию стоп благодаря конструктивным элементам из запатентованного материала PORON® разной плотности.

PORON®

это вспененный полиуретан класса Hi-TECH, который обладает максимальными характеристиками упругости и поглощения ударных вибраций по сравнению с аналогами.


АМОРТИЗАЦИЯ

пружинящий слой PORON® смягчает удар при соприкосновении с поверхностью, и помогает стопе отталкиваться при ходьбе, что облегчает движение и предотвращает усталость.

ЗАЩИТА

миллионы воздушных пузырьков, заключенные в гибкие полимерные мембраны, поглощают максимум ударных вибраций и защищают суставы от нагрузок, ведущих к микротравматизации.

СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ СТОПЫ

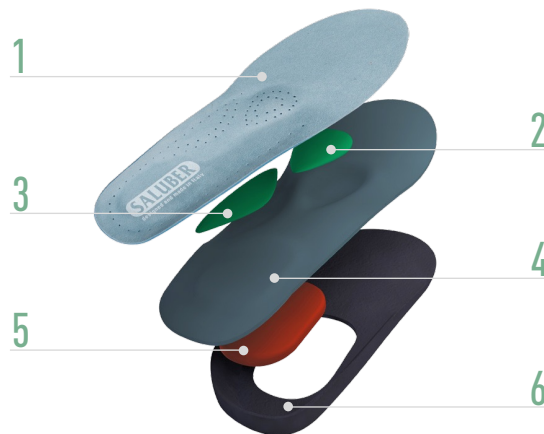

1. ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

в двух вариантах исполнения: ALCANTARA и REAL LEATHER.

2. МЕТАТАРЗАЛЬНЫЙ ВАЛИК ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ И ПЛОТНОСТИ ИЗ PORON®

динамично поддерживает поперечный свод и мягко пружинит при ходьбе, не вызывая дискомфорта.

3. УПРУГИЙ СУПИНАТОР ИЗ PORON®

обеспечивает динамическую поддержку продольного свода, способствует правильной постановке стопы при ходьбе и предотвращает завал стопы.

4. АМОРТИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ PORON®

толщиной 3 мм поглощает ударные вибрации и распределяет нагрузку по всей стопе (для моделей с ALCANTARA® арт. 480.46, 482.46)

5. УВЕЛИЧЕННЫЙ ПЯТОЧНЫЙ АМОРТИЗАТОР «АНТИ-ШОК» PORON®

поглощает удар, предохраняет суставы и позвоночник от микротравм и обеспечивает безболезненную ходьбу при пяточной шпоре.

6. НАДЕЖНЫЙ КАРКАС С ЭФФЕКТОМ «КОКОНА»

из смеси пластика и резины обеспечивает баланс между стабилизацией стопы и естественной био-механикой движения. Области продольного свода усилена ребрами жесткости, что предохраняет каркас от деформации даже при большом весе пациента.

АССОРТИМЕНТ

Подберите для себя наиболее подходящую модель ортопедических стелек из ассортимента SALUBER®

ALCANTARA®



арт. 480.46

арт. 482.46

Наиболее комфортные стельки с премиальным покрытием ALCANTARA® и амортизирующим слоем PORON®.

ALCANTARA® - запатентованный материал экстра-класса с уникальными свойствами. Мягкое и бархатистое покрытие отличается **высокой устойчивостью к износу**. Этот материал является современным аналогом натуральной замши, обладает гипоаллергенными свойствам и **предотвращает развитие бактерий**. Микроволокна в составе обеспечивают оптимальный воздухо-и влагообмен.

REAL LEATHER



арт. 405.46

арт. 401.30

Премиальные стельки из натуральной и бархатистой кожи высочайшего качества.

REAL LEATHER - натуральная коровья кожа премиальной выделки растительного дубления, без использования химических веществ. Не раздражает кожу и поддерживает естественный воздухо-влагообмен. Нескользкая поверхность и оптимальная толщина покрытия гарантируют высокую износостойкость и увеличивают срок службы.